

深圳简单医疗科技有限公司

手臂吊带

说明书

产品型号：31302 产品规格：F

感谢您购买本公司产品！请在操作前仔细阅读本使用说明书！以充分了解本产品，以保证本产品的安全性及有效性，并请妥当保存说明书以备将来查阅。

一. 产品概述

1.1 产品名称：手臂吊带

1.2 产品型号：31302

1.3 产品规格：F

1.4 产品结构：

产品主要由透气网布主体，肩带，肩衬垫，胸围带，塑胶扣和魔术贴等组成。

1.5 工作原理

产品采用开放式设计和柔软透气型材料，使得产品使用方便，佩戴舒适。加固型的胸围带使手臂不易晃动具有双重保护作用。内置的拇指环可平衡承重点，保持手臂的支撑力度，减轻拇指压力而有助于手臂的恢复。

1.6 适用范围

外用于手臂及上臂骨折固定、肩关节不稳及脱臼固定、手术后及石膏期使用、腕关节脱臼辅助固定的患者。

二. 产品特点及性能描述


2.1 产品特点及贮存条件

【产品特点】舒适,透气,穿戴方便,调整方便,内置拇指环,左右臂通用。

【贮存条件】本产品应贮存在相对湿度不大于 80%、无腐蚀性气体和通风良好的室内,避免高温。

2.2 使用操作

【使用方法】

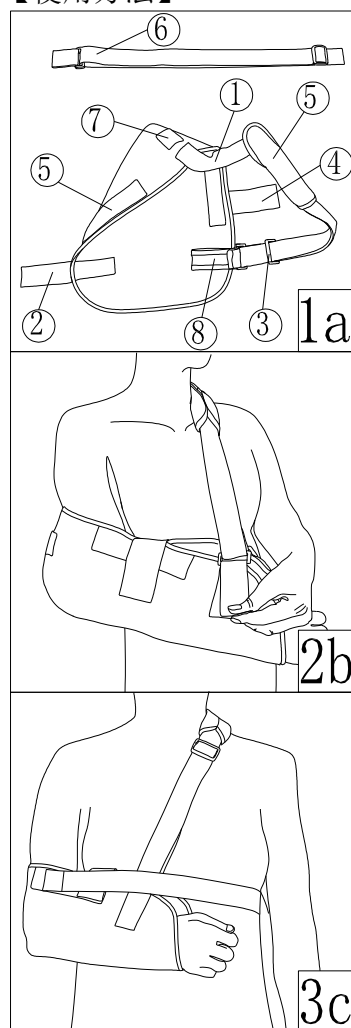

使用说明：

步骤 1：打开产品（图 1a）

步骤 2：将肩带#1 斜跨在肩膀上，手臂放入网兜中，拇指可挂在拇指环#8 上。将魔术贴#2 穿过塑胶环扣#3 并粘附在毛面上，再将魔术贴#4 固定在毛面魔术贴#5 上。调整肩带#1 的长度使肩衬垫#5 位于肩膀舒适位置上（图 2b）。

步骤 3：先将胸围带的一端固定在毛面魔术贴#7 上，胸围带环绕身体外侧并粘附在毛面魔术贴#5 上，再调整胸围带的长度，使受伤的手臂不轻易晃动（图 3c）

保养与维护

产品可以用中性洗涤剂和 30℃ 水手洗，并自然风干。切勿放入干衣机或使用其他热源进行干燥。盐水、沙子、污垢等元素会造成伤害。暴露于这些条件后，用清水彻底冲洗，毛巾擦干或风干（不要机器干燥）。如需洗涤剂请使用温和洗涤剂，切勿使用柔软剂和漂白剂。

警告：

如果您使用此产品时感到疼痛，肿胀，过敏，或有不适的反应，请停止使用并咨询医生。

*此产品仅为固定装置，不用于预防伤害或者防止再次发生伤害更不能替代药品和医生的正确诊断。

2.3 产品基本环境

1) 环境温度：-15~60℃

2) 相对湿度：≤80%

2.4 产品材料

1) 胸围带/肩带：尼龙

2) 肩衬垫：尼龙/海绵

3) 大身网兜：尼龙

4) 扣：聚乙烯

2.5 禁忌症

⚠ 出现过敏者请勿用；

⚠ 皮肤出现不明肿块者禁用；

⚠ 皮肤肿破溃疡者禁用；

三. 产品的保管，运输及有效期

3.1 产品有效期：3 年。

3.2 产品的保管：

未使用前请放置在干燥、清洁的室内，保证室内通风。

3.3 运输：本产品储存及运输的过程，应防尘、防潮、防污染。

四. 废弃物处理

包装纸（包装袋）的处理：本产品的包装请跟据所属地区法例进行弃置处理，对垃圾进行分类。

五. 标记符号及图片说明

⚠ 注意，警告

🚫 禁止机洗

☀ 避免日晒

📦 包装破损时切勿使用

🕒 有效期为 3 年

📖 参考使用说明

六. 配件清单

说明书----- 1 份

七. 售后承诺

产品出现材料或工艺方面的缺陷，请直接联系你的销售商，简单医疗科技有限公司将对产品进行维修或更换。

八. 厂家信息

【产品名称】手臂吊带

【医疗器械备案凭证编号】

粤深械备 20210462 号

【生产备案凭证编号】

粤深食药监械生产备 20170002 号

【产品技术要求编号】

粤深械备 20210462 号

【备案人】深圳简单医疗科技有限公司

【生产企业】深圳简单医疗科技有限公司

【地址】深圳市龙华区民治街道新牛社区布龙路 1010 号智慧谷创新园 519

【电话】0755-86038563

【传真】0755-86038509

【邮政编码】518109

【售后服务单位】深圳简单医疗科技有限公司

【说明书修订日期】2021 年 03 月 26 号

【网址】www.simplemedical.cn



Instruction for Use

Arm Sling E3

(Model: 31302 Size: F)

Thank you for purchasing our products! Please read this instruction carefully before operation! To fully understand the product, in order to ensure the safety and effectiveness of the product, and please properly save the manual for future reference

Product overview

1)Product name: Arm Sling E3

2)Product model: 31302

3)Product specification: F

4) Product Structure: The product is mainly composed of air-permeable mesh cloth, shoulder belt, shoulder pad, chest band, plastic button and magic tape.

5) Operating principle

The product adopts open design and soft breathable material, which makes the product easy to use and comfortable to wear. The reinforced chest band makes the arm difficult to shake and has a double protective effect. The built-in thumb ring can balance the key points, maintain the support strength of the arm, reduce the thumb pressure and help the recovery of the arm.

6) Scope of application: It is used for fracture fixation of arm and upper arm, instability and dislocated fixation of shoulder joint, post-operation and plaster stage, and dislocated wrist joint.


Product features and performance description

1) Product features and storage conditions

【Product features】 The product is Comfortable, breathable, Easy fit, convenient adjustment, Supportive with built-in thumb loops, Reversible on left or right arm.

【Storage conditions】 This product should be stored in a room with no more than 80% relative humidity, no corrosive gas and good ventilation to avoid high temperature

2) Using the operating **【Application Instructions】**

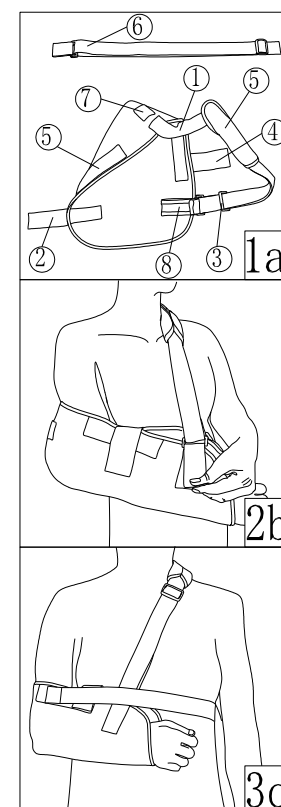

STEP 1:open the product (Fig 1a)

STEP 2: The shoulder strap # 1 is diagonally cross over the shoulder, the arm is placed in the net pocket, and the thumb can be hung on the thumb ring # 8. The magic tape # 2 is passed through the plastic ring buckle # 3 and adhered to the wool surface, and the magic tape # 4 is fixed on the surface magic tape # 5. Adjust the length of the shoulder strap # 1 so that the shoulder pad # 5 is in the shoulder comfort position(Fig2b)

STEP 3:First, one side of the chest band is fixed on the surface magic tape # 7, the chest band wraps around the outer side of the body and is adhered to the surface magic paste # 5, the length of the chest band is adjusted, and the injured arm is not easily shaken (Fig. 3c).

Maintenance:

Lining can use neutral detergent and 30 °C water washed by hand, and natural dry. Do not use clothes dryer or other heat source for drying. Salt water, sand, dirt and other elements can cause damage. After exposure to these conditions, rinse thoroughly with water, dry with a towel or air dry (do not machine dry).If you need detergent, please use mild detergent, do not use softener and bleach.

Warning:

If you experience pain, swelling, irritation, or discomfort while using this product, discontinue use and consult your doctor.

*This product is only a fixture and is not used to prevent injury or prevent recurrence of injury, much less to replace the correct diagnosis of drugs and doctors

Basic product environment

1) Ambient temperature: -15 ~ 60 °C

2) Relative humidity: 80%

Product material

1)chest strap / shoulder strap: nylon

2) shoulder pad: nylon / sponge

3) big net pocket: nylon

4) buckle: polyethylene

Contraindication

⚠ Do not use in case of allergy;

⚠ Those with unknown skin masses are forbidden;

⚠ Those with swollen or ulcerated skin are forbidden;

Storage, transportation and expiry date of products

1)Product is valid: Three years

2)Product storage: Please place it in a dry and clean room before use to ensure ventilation

3)Transportation: the product shall be dustproof, moisture-proof and pollution-proof during storage and transportation

Disposal of wastes

Disposal of wrapping paper (bags) : please dispose of the packaging of this product according to the local laws.

Symbol and picture description

Manufacture Date

Batch Code

medical device

CE Symbol



Hand wash only



Protect from sunlight



Do not use when the packing is damaged



Warnings and Precautions



Reference instructions

Accessories list

Instructions ----- 1 copy

After-sales warranty

If there is any defect in the material or process of the product, please contact your vendor directly, and the Simple medical will repair or replace the product.




Simple Medical (Shenzhen) Limited

Address: 519 Wisdom Valley, No.1010 Bulong Road, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, China.518109

Tel : +86-755-86038563

Web: www.simplemedical.cn

E-mail: info@simplemedicla.cn`

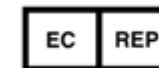

SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

*Please refer to the Instructions before usage