

深圳简单医疗科技有限公司

手臂吊带

说明书

产品型号：31303 产品规格：F

感谢您购买本公司产品！请在操作前仔细阅读本使用说明书！以充分了解本产品，以保证本产品的安全性及有效性，并请妥当保存说明书以备将来查阅。

一. 产品概述

1.1 产品名称：手臂吊带

1.2 产品型号：31303

1.3 产品规格：F

1.4 产品结构：

产品主要由舒适的海绵主体，肩带，肩带扣，胸围固定带和魔术贴等组成。

1.5 工作原理

产品采用开放式设计和柔软透舒适型材料，使得产品使用方便，佩戴舒适。加固型的胸围固定带使手臂不易晃动具有双重保护作用，有助于受伤的手臂恢复。

1.6 适用范围

适用于手臂骨折，肘关节骨折损伤、肩关节骨折脱臼的患者。

二. 产品特点及性能描述


2.1 产品特点及贮存条件

【产品特点】开放式设计，易于穿戴舒适，透气，固定牢固，稳定性增强。

【贮存条件】本产品应贮存在相对湿度不大于 80%、无腐蚀性气体和通风良好的室内，避免高温。

2.2 使用操作

【使用方法】

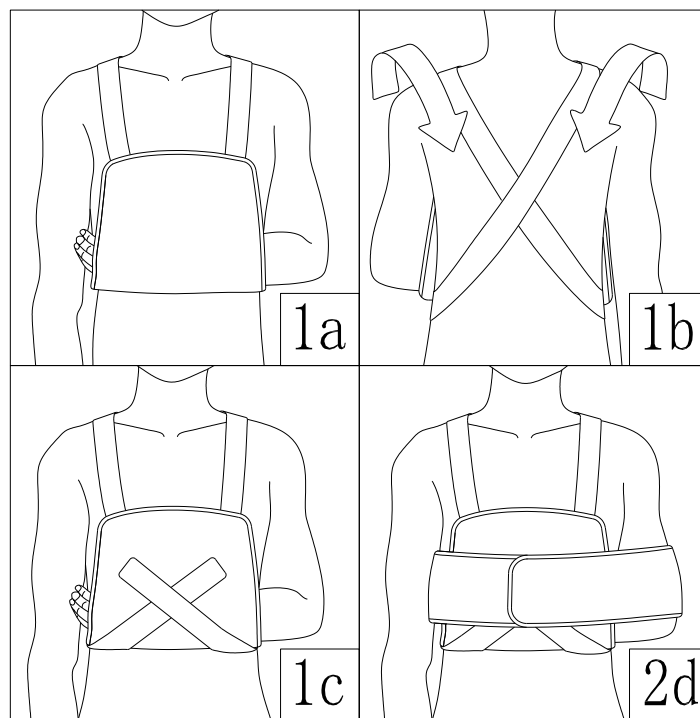

使用说明：

步骤 1：将受伤的手放入吊带兜内并置于胸前，再将两边的肩带绕过肩部从上往下以交叉的方式固定在吊带兜的前面（图 1a~1c）

步骤 2：将肩带调整到合适的长度后，再将胸围固定带的一端固定在吊带兜的表面上，环绕身体包围住受伤的手臂后将尾端固定在胸围固定带上（图 2d）

保养与维护

产品可以用中性洗涤剂和 30℃ 水手洗，并自然风干。切勿放入干衣机或使用其他热源进行干燥。盐水、沙子、污垢等元素会造成伤害。暴露于这些条件后，用清水彻底冲洗，毛巾擦干或风干（不要机器干燥）。如需洗涤剂请使用温和洗涤剂，切勿使用柔软剂和漂白剂。

警告：

如果您使用此产品时感到疼痛，肿胀，过敏，或有不适的反应，请停止使用并咨询医生。

*此产品仅为固定装置，不用于预防伤害或者防止再次发生伤害更不能替代药品和医生的正确诊断。

2.3 产品基本环境

1) 环境温度：-15~60℃

2) 相对湿度：≤80%

2.4 产品材料

1) 肩带：尼龙

2) 胸围固定带：尼龙/海绵

3) 大身主体：尼龙/海绵

4) 肩带扣：聚乙烯

2.5 禁忌症

⚠ 出现过敏者请勿用；

⚠ 皮肤出现不明肿块者禁用；

⚠ 皮肤肿破溃疡者禁用；

三. 产品的保管，运输及有效期

3.1 产品有效期：3 年。

3.2 产品的保管：

未使用前请放置在干燥、清洁的室内，保证室内通风。

3.3 运输：本产品储存及运输的过程，应防尘、防潮、防污染。

四. 废弃物处理

包装纸（包装袋）的处理：本产品的包装请跟据所属地区法例进行弃置处理，对垃圾进行分类。

五. 标记符号及图片说明

⚠ 注意，警告

🚫 禁止机洗

☀ 避免日晒

🚫 包装破损时切勿使用

🕒 有效期为 3 年

📖 参考使用说明

六. 配件清单

说明书----- 1 份

七. 售后承诺

产品出现材料或工艺方面的缺陷，请直接联系你的销售商，简单医疗科技有限公司将对产品进行维修或更换。

八. 厂家信息

【医疗器械备案凭证编号】

粤深械备 20210462 号

【生产备案凭证编号】

粤深食药监械生产备 20170002 号

【产品技术要求编号】

粤深械备 20210462 号

【备案人】深圳简单医疗科技有限公司

【生产企业】深圳简单医疗科技有限公司

【地址】深圳市龙华区民治街道新牛社区布龙路 1010 号智慧谷创新园 519

【电话】0755-86038563

【传真】0755-86038509

【邮政编码】518109

【售后服务单位】深圳简单医疗科技有限公司

【说明书修订日期】2021 年 03 月 26 号

【网址】www.simplemedical.cn



Instruction for Use

Multi-functional Arm Sling E4

(Model: 31303 Size: F)

Thank you for purchasing our products! Please read this instruction carefully before operation! To fully understand the product, in order to ensure the safety and effectiveness of the product, and please properly save the manual for future reference

Product overview

1)Product name: Multi-functional Arm Sling E4

2)Product model: 31303

3)Product specification: F

4) Product Structure:

The product is mainly composed of comfortable sponge body, shoulder buckle, chest circumference fastening belt and magic sticker.

5) Operating principle

The product adopts open design and soft and comfortable material, which makes the product easy to use and comfortable to wear. The reinforced chest band makes the arm difficult to shake and has a double protective effect on the recovery of the injured arm.

6) Scope of application:

It is used for Shoulder contusion and strain, Shoulder dislocation, The stability of the top of the humerus fracture, Fracture of the shoulder blade.

Product features and performance description

1)Product features and storage conditions

【Product features】


Open design, easy fit Comfortable, breathable. Firm fixation, reinforced stability.

【Storage conditions】

This product should be stored in a room with no more than 80% relative humidity, no corrosive gas and good ventilation to avoid high temperature

2) Using the operating

【Application Instructions】

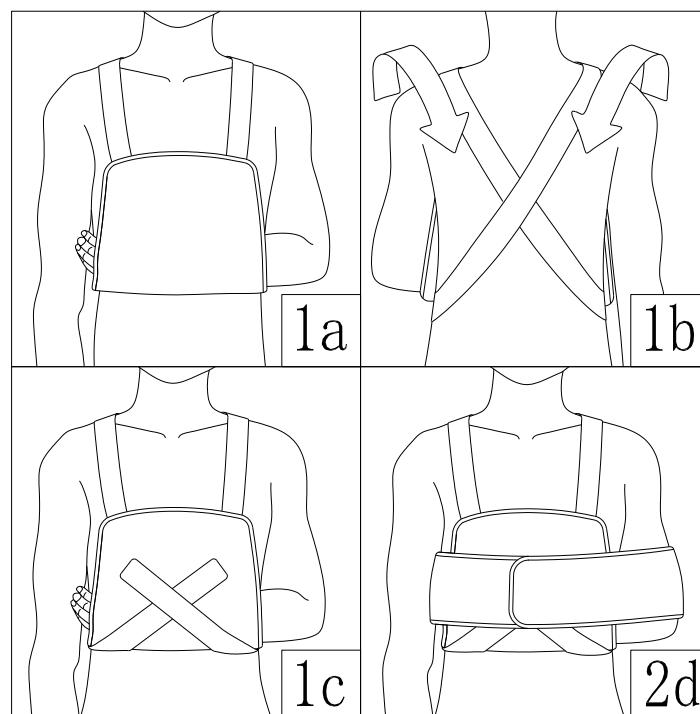

APPLICATION INSTRUCTIONS

STEP 1:Place the injured hand in the sling pocket and place it in front of the chest, and then fasten the shoulder straps around the shoulders from top to bottom in front of the sling pocket (Fig. 1a~1c)

STEP 2: after adjusting the shoulder strap to the appropriate length, fix one end of the chest strap to the surface of the sling pocket, surround the body around the injured arm, and fix the tail end to the chest strap (Fig. 2d).

Maintenance:

Lining can use neutral detergent and 30 °C water washed by hand, and natural dry. Do not use clothes dryer or other heat source for drying. Salt water, sand, dirt and other elements can cause damage. After exposure to these conditions, rinse thoroughly with water, dry with a towel or air dry (do not machine dry).If you need detergent, please use mild detergent, do not use softener and bleach.

Warning:

If you experience pain, swelling, irritation, or discomfort while using this product, discontinue use and consult your doctor.

*This product is only a fixture and is not used to prevent injury or prevent recurrence of injury, much less to replace the correct diagnosis of drugs and doctors

Basic product environment

1) Ambient temperature: -15 ~ 60 °C

2) Relative humidity: 80%

Product material

1) shoulder strap: nylon

2) Chest circumference fixed belt : nylon / sponge

3) main body : nylon / sponge

4) buckle: polyethylene

Contraindication

⚠ Do not use in case of allergy;

⚠ Those with unknown skin masses are forbidden;

⚠ Those with swollen or ulcerated skin are forbidden;

Storage, transportation and expiry date of products

1)Product is valid: three years

2)Product storage: Please place it in a dry and clean room before use to ensure ventilation

3)Transportation: the product shall be dustproof, moisture-proof and pollution-proof during storage and transportation

Disposal of wastes

Disposal of wrapping paper (bags): please dispose of the packaging of this product according to the local laws.

Symbol and picture description

Manufacture Date

Batch Code

medical device

CE Symbol

Hand wash only

Protect from sunlight

Do not use when the packing is damaged

Warnings and Precautions

Reference instructions

Accessories list

Instructions ----- 1 copy

After-sales warranty

If there is any defect in the material or process of the product, please contact your vendor directly, and the Simple medical will repair or replace the product.

Simple Medical (Shenzhen) Limited
Address: 519 Wisdom Valley, No.1010 Bulong Road,
Minzhi Street,Longhua District,
Shenzhen, China.518109
Tel : +86-755-86038563
Web: www.simplemedical.cn
E-mail: info@simplemedicla.cn`

EC REP
SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

***Please refer to the Instructions before usage**